



GUÍA DEL USUARIO

PARA CUALQUIER CONSULTA SIÉNTASE EN LA LIBERTAD
DE CONTACTARNOS VÍA EMAIL POR:
USKIN.MX@GMAIL.COM

FAVOR DE LEER COMPLETAMENTE LA GUÍA ANTES DE USAR SU KIT
DE DEPILACIÓN.

Precauciones:

- No usar alrededor de los ojos (puede usarse desde los pómulos hacia abajo)
- No usar cerca del agua
- No apto para menores de 16 años
- No apto para embarazadas
- No usar si usted tiene epilepsia
- No usar sobre los tatuajes
- No usar sobre piel quemada o lastimada
- No hacer el tratamiento sobre la misma área por más de una vez por sesión
- Se recomienda usar desde la primera sesión en la intensidad más baja y posteriormente ir subiendo la intensidad cada semana (si alcanza una intensidad que es dolorosa, deberá usar una intensidad más baja)
- Se recomienda altamente que después de cada pulso, se levante un poco la depiladora de la piel para dejar aire pasar y prevenir el sobrecalentamiento de esta

***La luz intensa pulsada puede usarse con todas las pieles excepto pieles muy oscuras**

- Nunca apuntar la salida de luz pulsada a los ojos
- Después de usar este producto, su piel puede presentar un tono ligeramente rojo o sensación de hormigueo cálido, esto es inofensivo y desaparecerá rápidamente
- Si ha estado usando el tratamiento de depilación láser en una clínica anteriormente, se recomienda esperar al menos 2 semanas antes de usar este producto para evitar reacciones
- Remueva cualquier bronceador o crema antes de utilizar
- Si usted se ha bronceado, deberá esperar 2 semanas antes de usarse para evitar cualquier reacción
- Espere 48 horas después de su uso para poder broncearse o aplicar cualquier bronceador artificial
- Consulte a su médico si presenta cualquier reacción adversa



Antes de empezar:

- Es muy importante rasurarse cualquier vello visible antes de usarse (se recomienda rasurar un día antes para no irritar la zona)
- Asegúrese de que su piel esté completamente limpia y seca (no usar cremas ni geles cuando use el aparato de depilación)

Uso:

- Conecte el aparato y presione el botón verde trasero para encender
- Este botón verde también es para cambiar el nivel de intensidad (1 para baja y 5 para alta)
- Las luces delanteras indican el nivel de intensidad
- Asegúrese que el nivel de intensidad este en el 1 en su primera sesión
- Para mejores resultados, deberá usar la depiladora en el nivel más alto posible que no genere dolor. Se recomienda ir subiendo gradualmente la intensidad en el transcurso de cada sesión si la experiencia pasada no fue dolorosa
- La depiladora tiene un sensor y no hará flashes hasta que la ventana de luz esté en contacto directo con su piel. Si no está en contacto directo con su piel, la luz rosa estará prendida y no se hará flash
- La luz rosa empezará a parpadear cuando ponga la ventana de luz sobre su piel. Esto indica que la depiladora está lista para usarse
- Haga clic en el botón de pulso, continúe esto en las áreas hasta terminar, separando la depiladora de la piel después de cada clic para evitar su sobrecalentamiento
- Para áreas con más vello, se recomienda pasar la depiladora por la misma área dos veces o más
- Presione el botón verde por unos segundos para apagar y desconectar
- Para limpiar su depiladora humedezca ligeramente una tela y limpie suavemente sobre la ventana de luz. Asegúrese que esté desconectada



Consejos de uso:

- La IPL (luz pulsada intensa) es efectiva solamente cuando el folículo del pelo está unido a la célula capilar, por lo que se debe asegurar no depilarse con cera o sacarse el vello con pinza antes de usar; ya que estos métodos remueven toda la célula capilar.
- Es mejor usar protector solar si se expone al sol después de usar el producto
- Para áreas más pequeñas, puede escoger pulsar el botón cada vez hasta cubrir completamente el área
- Para áreas más grandes, puede mantener pulsado el botón para ir más rápido y activar el modo automático, presione el botón de pulso otra vez para salir de este modo
- Si tiene piel sensible, se recomienda rasurar la noche anterior o en la mañana de su tratamiento para evitar irritación
- Humecte su piel después del tratamiento para mantener a su piel sana, puede ser con crema, aloe vera o gel para uso después de asolearse


Visite el perfil de Instagram: @uskin.mx para ver más detalles y mejor explicación de uso.

Frecuencia de uso:

- Se recomienda hacer el tratamiento de depilación una vez por semana durante las primeras 12 semanas. Se puede usar hasta dos veces por semana para resultados más rápidos. Después de este periodo, use su depiladora una vez por mes por 3 meses o hasta estar satisfecha con sus resultados
- Para mantener una piel suave libre de vellos, use su depiladora una vez cada dos o tres meses para retoques solamente

Resultados:

- Los resultados pueden variar entre personas. La mayoría de los usuarios presentan una reducción de vello después de 4 semanas con resultados completos después de 12 semanas
- No es necesario tratar las áreas más de una vez por semana. esto es porque IPL es más efectivo cuando el vello está en etapa de crecimiento y algunos vellos pueden estar inactivos durante el tratamiento, es por eso que se recomienda usar por 12 semanas consecutivas el tratamiento
- Si está teniendo dificultad para ver resultados, trate de usar una intensidad más alta por 2 veces a la semana, haga esto hasta ver resultados, después se puede reducir su uso.

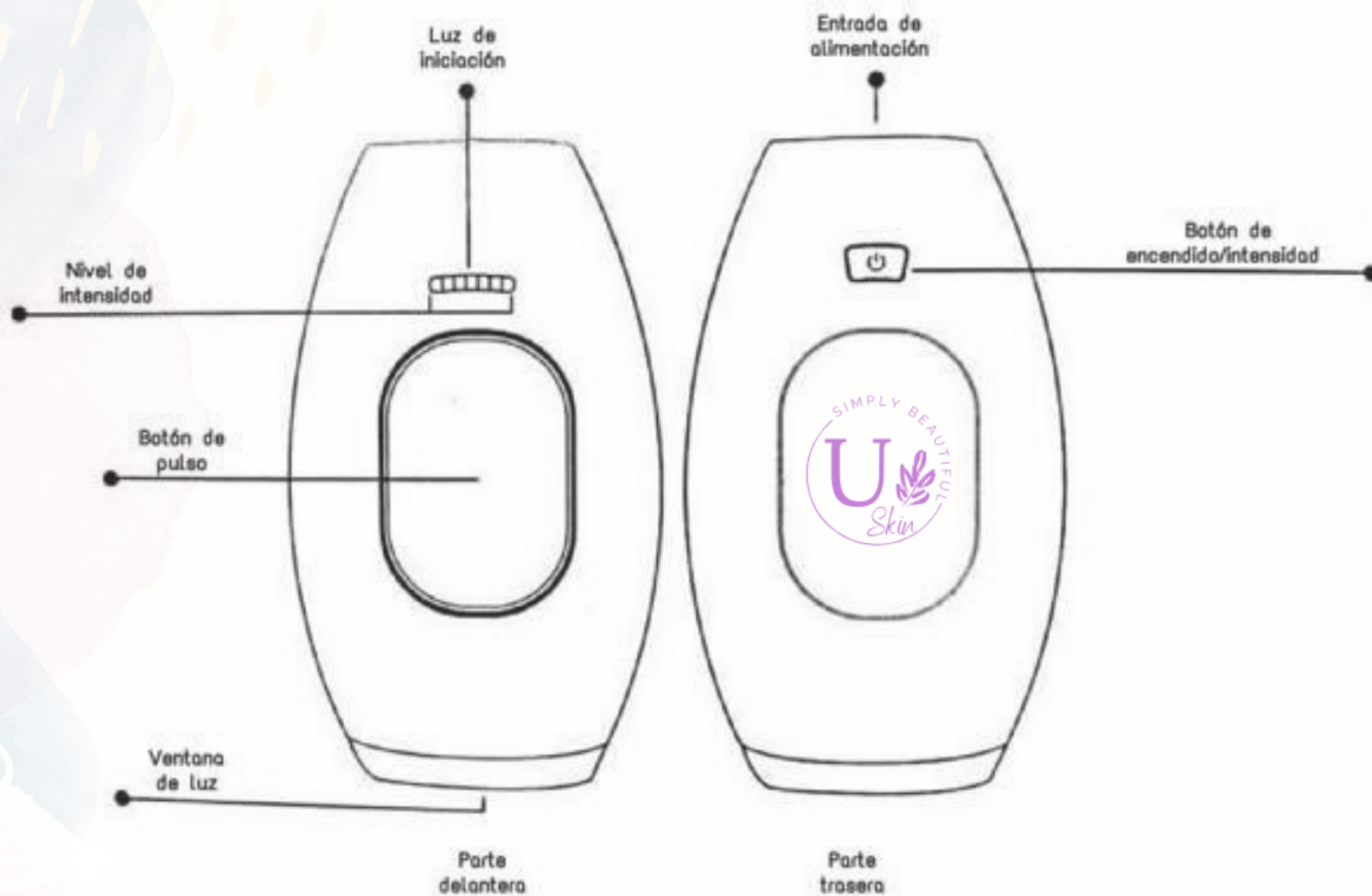

Pasos para usar el dispositivo:

1. Conectar el cable a la entrada de alimentación y al enchufe de electricidad.
2. Prender el dispositivo en el botón de encendido y poner la intensidad deseada. (la intensidad se ve en las líneas de la parte delantera)
3. Poner la ventana de luz pegada a la piel en la zona deseada a tratar.
4. Pulsar el botón de pulso por cada flash que quiera realizar, para flashear continuamente, presionar por unos segundos el botón hasta activar el modo automático.



1

Remover el vello de la superficie y limpiar área a tratar



2

Conectar el dispositivo y prender



3

Configurar la intensidad



4

Colocar el dispositivo verticalmente sobre la piel y pulsar para hacer flash



5

Disfrutar su experiencia de IPL

TABLA DE TONOS DE PIEL APTOS PARA USKIN

